


# AXIS STERİLİZASYON RULO KAPATMA CİHAZI

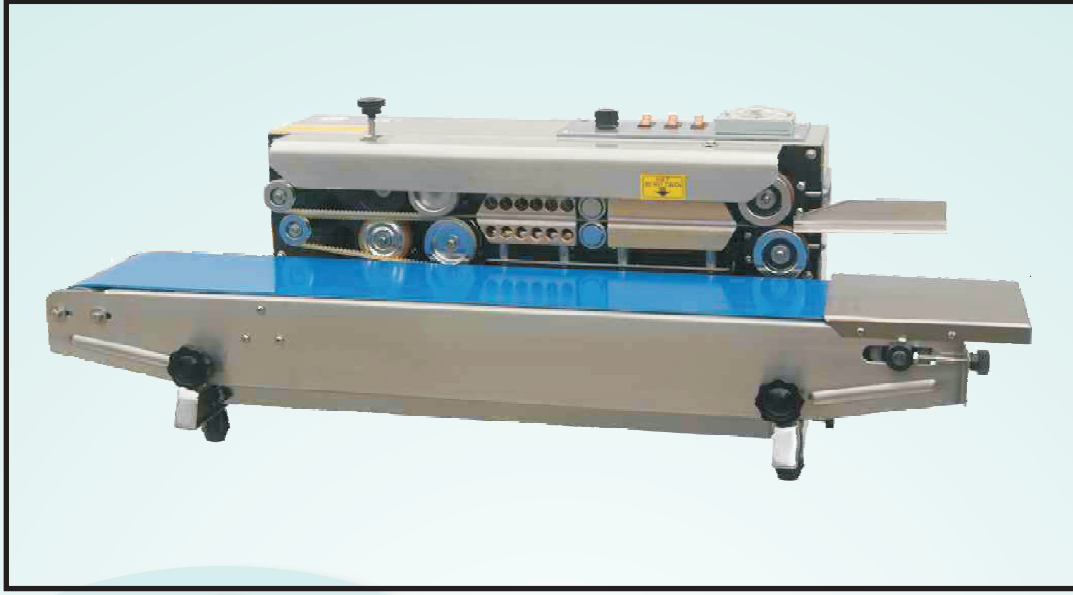

Cihaz otomatik olarak kapatma işlemini yapar.

Ameliyathane ortamına çalışmaya uygun olarak dış ve iç yüzeyi tamamen paslanmaz çeliktir.

Opsiyonel olarak çıkartılabilen konveyörü ile kapatma işlemi sırasında paketleri tutmanıza gerek kalmaz.

Kapatma hızı üzerindeki pot ile 0-12 m/s aralığında sonsuz ayarlanabilmektedir.

Kapatma genişliği 12 mm olup sterilizasyon rulolarındaki tipte bariyerli, kuvvetli yapıştırma yapmaktadır.

Döner tekerlekli sistemi ile her boy ruloyu kapatabilmektedir.

Rulo yapıştırma kanalları üzerine soğuk damga tarih, bilgi vs. basabilmektedir.

Cihazla birlikte elektronik kontrol kartı, 4 adet konveyör kayışı, 20 adet teflon bandı, tornavida-anahtar-alyan seti yedek olarak ücretsiz verilmektedir.

Cihaz 38x84x32 mm ölçülerindedir.

KORDON TIP SAĞLIK ARAÇ VE GEREÇLERİ LTD.ŞTİ.

275/10 s. 3/1

Bornova / İzmir

<http://www.axis.com.tr>

Tel: +90-232-3486060 Fax: +90-232-3486090



EN ISO 13485



1015